

**Silhouette**<sup>®</sup>  
 ICONIC EYEWEAR MADE IN AUSTRIA. SINCE 1964.

SUN 2019  
 Mod. 8701




INFINITY COLLECTION

INFINITY COLLECTION / Mod. 8701

**SPARE PARTS**  
 ERSATZTEILE / PIÈCES DE RECHANGE

Boxing System / Kastensystem / Système de castes

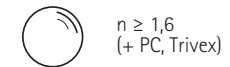

Metallfassung aus High-Tech Titan  
 Gläser: Polycarbonat  
 Wölbung: Base 6  
 100 % UV A-, B-, C-Schutz

Metal frame made of High-Tech Titanium  
 Lenses: polycarbonate  
 Curving: base 6  
 100 % UV A-, B-, C-protection

Monture en métal en High-Tech Titanium  
 Verres: polycarbonate  
 Courbure: base 6  
 Protection de 100 % de UV A, B, C



Property of Silhouette / © Silhouette



für optische Verglasung / for optical glazing / pour le montage des verres correcteurs

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  
 specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints  
 sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

[www.silhouette.com](http://www.silhouette.com)

## SILHOUETTE LIGHT MANAGEMENT

POL

### Col. / 75-6560

POL GREEN

**metal parts:** ruthenium silky matte  
**outer lenses:** grey with print transparent matte  
**decoration:** black matte  
**temple ends:** black matte



Light Management

### Col. / 75-7010

CLASSIC GREY GRADIENT

**metal parts:** silver silky matte  
**outer lenses:** grey silver mirror with print black matte  
**decoration:** black matte  
**temple ends:** black matte



### Col. / 75-7110

COBALT BLUE

**metal parts:** titanium silky matte  
**outer lenses:** grey silver mirror with print blue matte  
**decoration:** blue matte  
**temple ends:** dark blue matte



POL


### Col. / 75-7540

POL GREY

**metal parts:** black matte  
**outer lenses:** brown gold mirror with striped print black matte  
**decoration:** black matte  
**temple ends:** black matte



Light Management

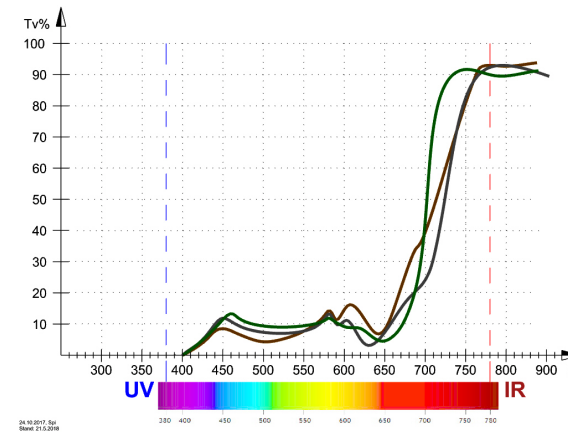

PROTECTION  
SCHUTZ  
PROTECTION

CLASSICAL  
MUST HAVE  
COLORS



FUNCTION  
FUNKTION  
FONCTION

**High blue-light protection**  
Hoher Blaulichtschutz / Protection performante contre la lumière bleue

**100% UV protection**  
100 % UV Schutz / Protection à 100 % contre les UV

**Glare protection**  
Blendschutz / Protection contre l'éblouissement

**Anti-reflection (POL)**  
Reflexionsschutz (POL) / Protection contre la réverbération (POL)

**Contrast enhancement**  
Kontraststeigerung / Augmentation des contrastes

**Vibrant colours**  
Brilliante Farben / Couleurs brillantes

**Low-light vision enhancement**  
Aufhellung / Éclaircissement

**Peripheral vision**  
Peripheres Sehen / Vision périphérique

**Sleep-cycle protection**  
Schlaf-Wach Rhythmus bewahrend / Pour conserver le rythme d'éveil et de sommeil

**3 Classic Must-Have Colours (Brown, Grey, Green)**  
Classical must have colors (Braun, Grau, Grün) / Couleurs classiques incontournables (Brun, Gris, Vert)

## IN-LINE GLAZING

### Milling of optical lenses with nylon-groove


Groove-depth:	0,5 mm
Groove-width:	0,7 mm
Basis curve frame:	5B
Basis curve lens:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm

### Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen

Nuttiefe:	0,5 mm
Nutbreite:	0,7 mm
Basiskurve Fassung:	5B
Basiskurve Linse:	4-6 B
Minimale Glasranddicke:	1,8 - 2,0 mm

### Taillage des verres optiques avec rainure nylon

Profondeur de rainure:	0,5 mm
Largeur de rainure:	0,7 mm
Courbure de base de la monture:	5B
Courbure de base du verre:	4-6 B
Verre:	1,8 - 2,0 mm

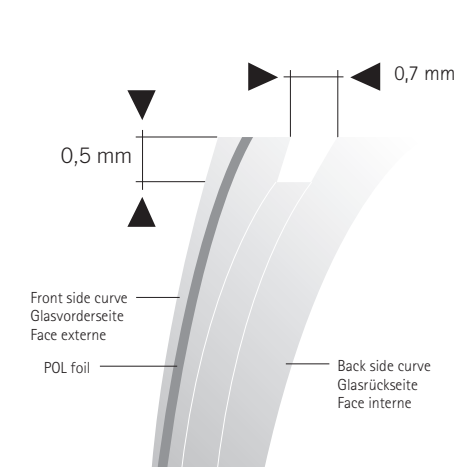

**ATTENTION:** due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!

**ACHTUNG:** wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!

**ATTENTION:** en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

Insert lens from behind!  
Note: mounting from the front could crack the lens

Linse von hinten einsetzen!  
Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

Insérez le verre par l'arrière!  
Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



Transfer shape only via formers or OMA-files!  
Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!

Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!