


AJUSTAR HASTES

7745



Desmontagem do terminal



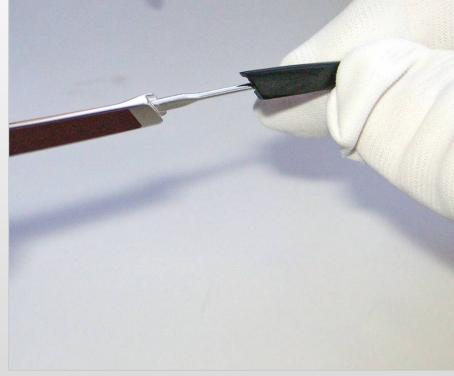


1. Solte a cola dentro do terminal, pressionando a haste e usando o alicate.

2. Retire o terminal.



Desmontagem da haste

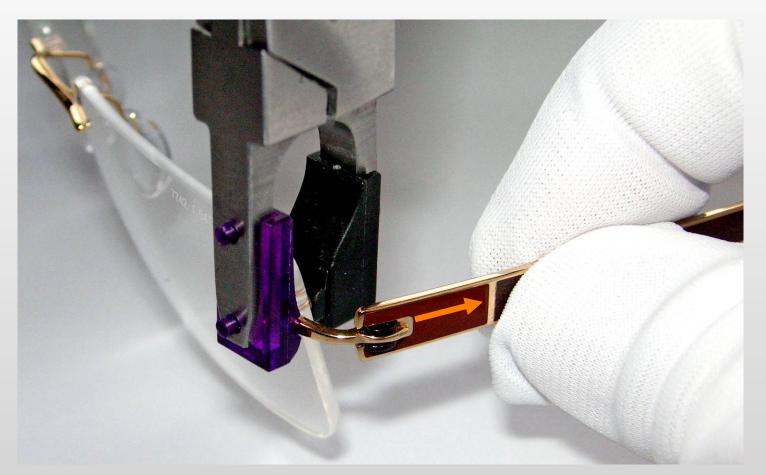


- 1. Segure firmemente a zona de fixação das lentes com um alicate
- 2. Dobreligeiramente a haste e puxe-a para fora da charneira, a direito.

Nota: a força aplicada, apenas deve ser feita para trás.



Fixar os cilindros

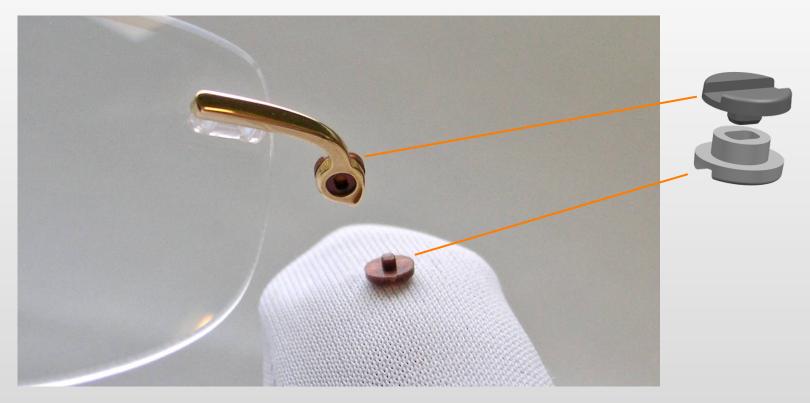


Coloque o cilindro de cada lado da charneira.

NOTA: A forma oval assegura o correcto posicionamento dos cilindros ao montar.



Montagem das hastes

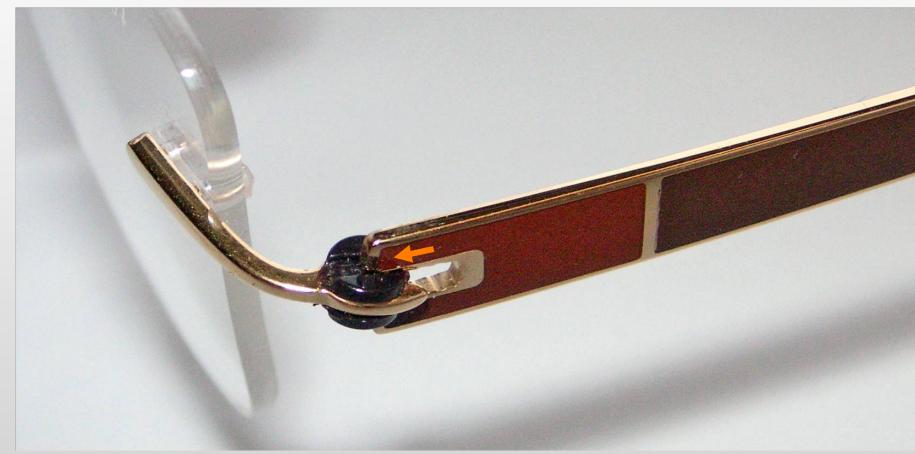

Coloque a haste perfeitamente alinhada com a charneira e cuidadosamente faça pressão até encaixar.