

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

INSERÇÃO ÓPTICA


Titan Contour Metal

Ferramenta de montagem Silhouette



Número de peça: VGLH3

Remoção das lentes

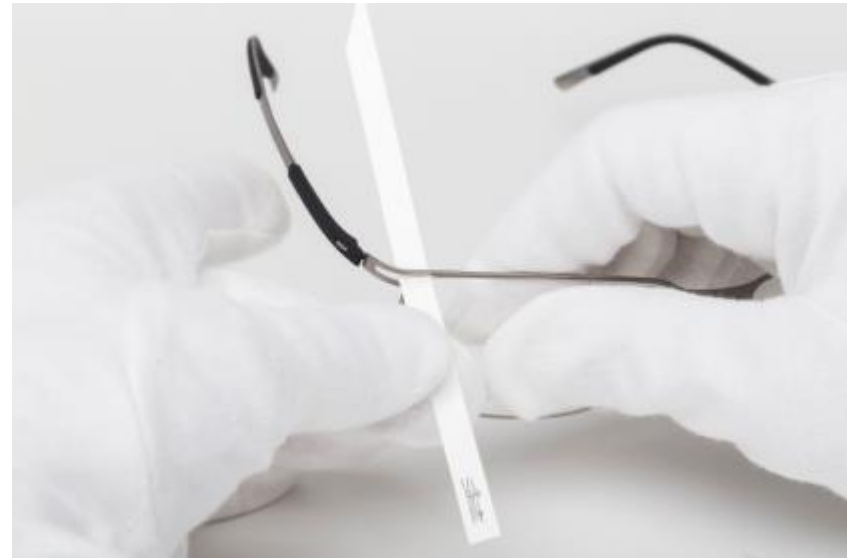

Insira a ferramenta de montagem
Silhouette no orifício

Remoção das lentes



Levante o topo da armação



Puxe para a frente e remova a lente

Colocar a lente



Insira a lente pela parte de trás



Insira a ferramenta de montagem

Colocar a lente



- Coloque a ferramenta de montagem por trás da haste
- Levante a armação e puxe em direcção à abertura

Retire a ferramenta de montagem