


Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

5506


AJUSTAR HASTES

Inspire | Abertura da haste - alargar

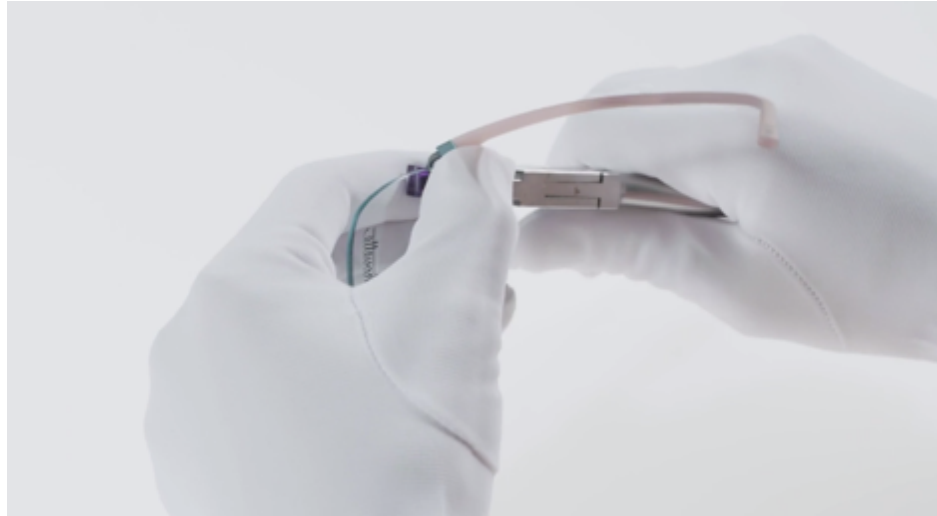

1. Abra a haste.
2. Segure firmemente a armação com o alicate de montagem
3. Pressione a haste para fora com o polegar

Inspire | Abertura da haste - reduzir

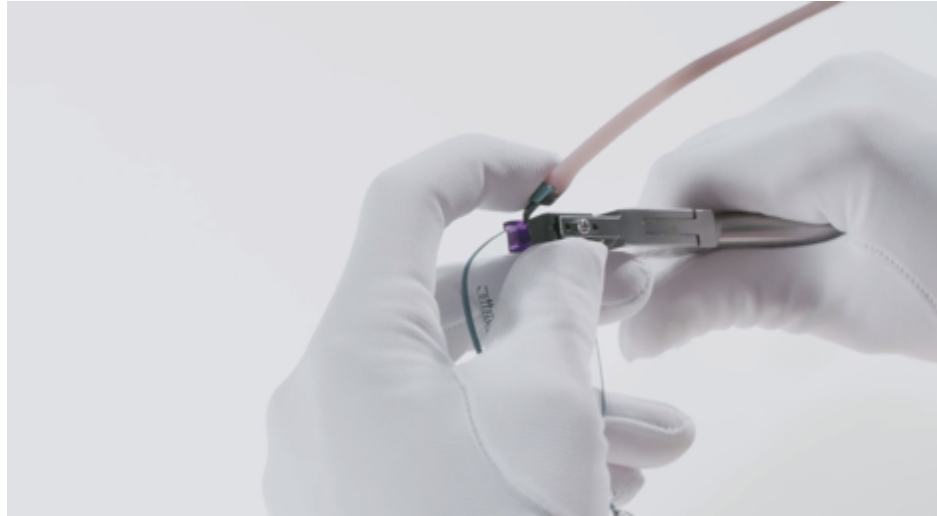

1. Abra a haste.
2. Segure firmemente a armação com o alicate de montagem
3. Pressione a haste para dentro com o dedo indicador

Inspire | Curvatura da haste



Ajuste a curvatura do terminal com movimentos largos e fluidos.
Nunca dobrar!

Inspire | Desmontagem da haste



1. Segure a haste, na posição em que esta está fechada, com o polegar e dedo indicador.
2. Aplique pressão com o dedo indicador – a haste acabará por fazer um “click” e sair.

Inspire | Montagem da haste



Alinhe a haste com a charneira e pressione com o seu polegar.