

Silhouette[®]

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

AJUSTAR HASTES

Titan Contour Metal

Ajuste a abertura da haste

Segure a armação com o alicate

➤ reduzir:

- Pressione para dentro na charneira com o polegar

➤ alargar:

- Pressione para fora na charneira com o indicador



Mudança de haste



- A abertura da charneira está a 90° da lente, mas a distancia entre a lente e a charneira é o suficiente para que nenhuma ferramenta seja necessária
- Feche a haste e retire a haste para fora
- Lubrifique a abertura da haste com teflon




Ajuste a haste atrás da orelha

Perfil de titânio dentado



Curvar a haste:

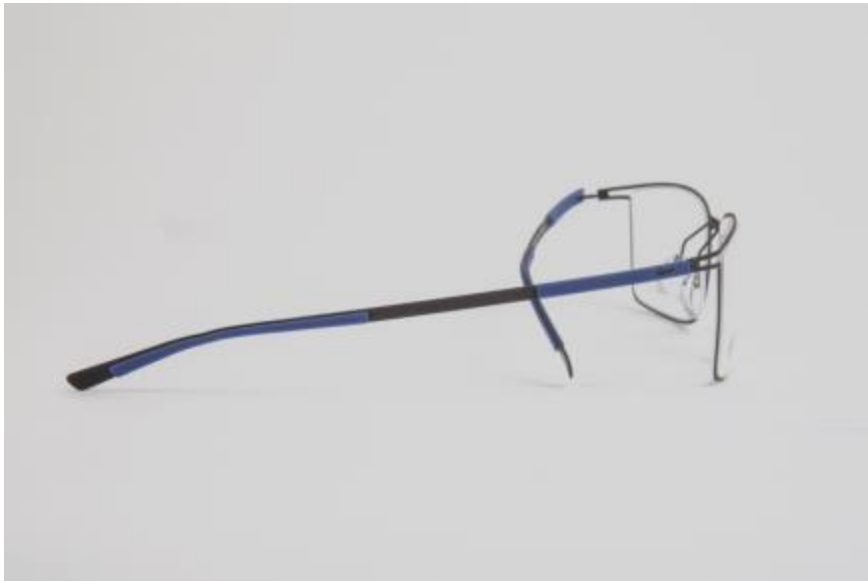

1. Endireite a haste em pequenos passos



2. Dobre em pequenos passos a curvatura pretendida

Silhouette®

AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.