









Boxing System / Kastensystem / Système de castes

			
53 x 37 (16,55 cm <sup>2</sup> ) 55 x 39 (17,82 cm <sup>2</sup> )	58 60	17 18	140 145



AP 11 (fixation for nylon thread)

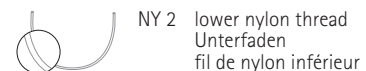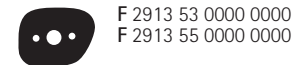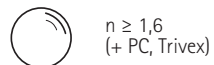We recommend base curve 5, other curves possible.  
Wir empfehlen Basiskurve 5, andere Basiskurven möglich.  
Nous recommandons base 5, autres courbes possible.

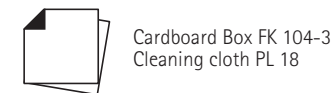

technical instructions VH 77  
MH3 rubber ring

glazing tool VGLH 3

**Mod. 2913**

SPX®+ frame with parts made of High Tech Titanium

SPX®+ Fassung mit Teilen aus High Tech Titan


Monture en SPX®+ avec parties en High Tech Titanium

**METAL PARTS SURFACE / OBERFLÄCHEN METALLTEILE / SURFACES METALLIQUES**


**Col. /3110, 6510, 9110**  
titanium plated, with lacquer finish  
mit Titan beschichtet, mit Lackfinish  
plaqué en titane, avec finition vernie

**Col. /6130**  
gold plated, with lacquer finish  
vergoldet, mit Lackfinish  
plaqué-or, avec finition vernie

**SPX ILLUSION NYLOR**

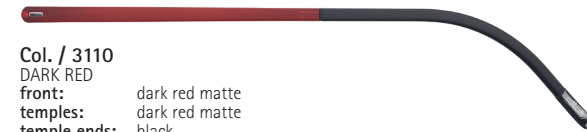

**Col. / 3110**  
**DARK RED**  
**front:** dark red matte  
**temples:** dark red matte  
**temple ends:** black  
**temple tips:** black shiny

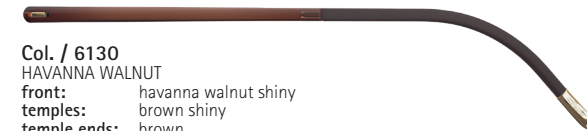

**Col. / 6130**  
**HAVANNA WALNUT**  
**front:** havanna walnut shiny  
**temples:** brown shiny  
**temple ends:** brown  
**temple tips:** gold shiny



**Col. / 6510**  
**GREY**  
**front:** grey shiny  
**temples:** grey shiny  
**temple ends:** dark grey  
**temple tips:** silver shiny



**Col. / 9110**  
**BLACK**  
**front:** black matte  
**temples:** black matte  
**temple ends:** black  
**temple tips:** black shiny

## IN-LINE GLAZING

### Milling of optical lenses with nylon-groove


Groove-depth:	0,55 mm
Groove-width:	0,7 mm
Basis curve frame:	5B
Basis curve lens:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm

### Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen

Nuttiefe:	0,55 mm
Nutbreite:	0,7 mm
Basiskurve Fassung:	5B
Basiskurve Linse:	4-6 B
Minimale Glasranddicke:	1,8 - 2,0 mm

### Taillage des verres optiques avec rainure nylon

Profondeur de rainure:	0,55 mm
Largeur de rainure:	0,7 mm
Courbure de base de la monture:	5B
Courbure de base du verre:	4-6 B
Verre:	1,8 - 2,0 mm

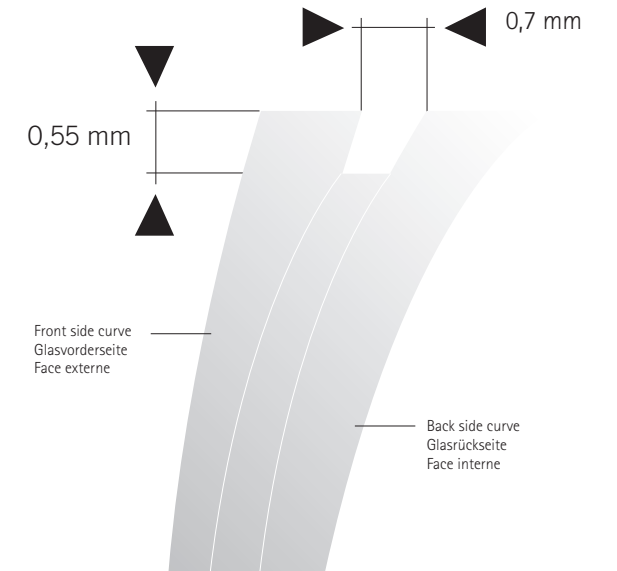

Transfer shape only via formers or OMA-files!  
 Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!  
 Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

- ATTENTION:** due to minimalist diameters of front frame do not heat under any circumstances!
- ACHTUNG:** wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens auf keinen Fall erwärmen!
- ATTENTION:** en raison du contour mince, ne jamais chauffer la monture!

- Insert lens from behind!  
 Note: mounting from the front could crack the lens
- Linse von hinten einsetzen!  
 Notiz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens
- Insérez le verre par l'arrière!  
 Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre



## NEW - NEU - NOUVEAU

The sensation of perfect vision. PREMIUM LENSES MADE BY SILHOUETTE.  
 Die Sensation perfekten Sehens. HOCHWERTIGE GLÄSER AUS DEM HAUSE SILHOUETTE.  
 La sensation d'une expérience visuelle parfaitement aboutie. DES VERRÉS HAUT DE GAMME PAR SILHOUETTE.