

**Silhouette**<sup>®</sup>  
AUTHENTIC EYEWEAR. SINCE 1964.

Mod. 1559




SILHOUETTE  
Urban LITE

Urban LITE  
Mod. 1559

Kastensystem/Boxing system

	mm	51 x 40 (16,97 cm²)	53 x 41 (18,33 cm²)
	mm	58	60
	mm	15	16
	mm	145	145

Bügel-Sonderlängen / Special temple lengths / Branches longueurs spéciales: 140 mm

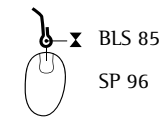

Ersatzteile / Spare parts / Pièces de rechange

Mod. 1559

SPX<sup>®</sup>+ Fassung mit Metallbügel aus High-Tech Titan  
SPX<sup>®</sup>+ frame with metal temples made of High Tech Titanium  
Monture en SPX<sup>®</sup>+ avec branches en High Tech Titanium

Col. /20-6053  
vergoldet mit Lackfinish  
gold plated, with lacquer finish  
plaqué-or, avec finition vernie

Col. /60-6057  
mit Ruthenium beschichtet, mit Lackfinish  
ruthenium plated, with lacquer finish  
plaqué en ruthenium, avec finition vernie

Col. /40-6054, 6055, 6056  
mit Farbfinish und Lackbeschichtung  
with colour- and lacquer-finish  
avec couleur de finition-vernies

technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten  
specifications are subject to change without notice, no liability will be assumed for misprints  
sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression

www.silhouette.com


Urban LITE  
Mod. 1559




/20-6053  
**HAVANNA / GOLD**  
front havanna amber matte / temples gold matte /  
temple ends brown / caps titanium shiny




/40-6054  
**BLACK**  
front black matte / temples black matte /  
temple ends black / caps black shiny

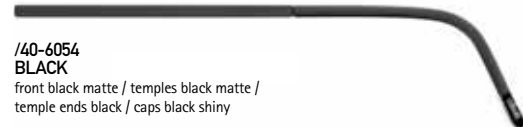


/40-6056  
**TEAL**  
front teal matte with print on bridge teal / temples aqua silky-matte /  
temple ends teal / caps chrome shiny

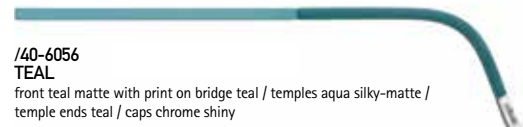

/40-6058  
**BURGUNDY / BLACK**  
front red matte with print on bridge burgundy / temples black matte /  
temple ends black / caps black shiny

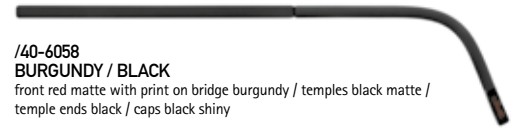

/60-6057  
**BEIGE / MATTE GREY**  
front beige matte with print on bridge mud /  
temples ruthenium matte / temple ends beige / caps titanium shiny

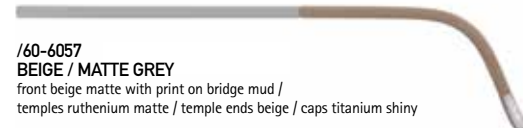

Optische Linse mit Nylon-Nut schleifen

Nuttiefe:	0,4 - 0,5 mm
Nutbreite:	0,7 mm
Basiskurve Fassung:	5B
Basiskurve Linse:	4-6 B
Minimale Glasranddicke:	1,8 - 2,0 mm


Milling of optical lenses with nylon-groove:

Groove-depth:	0,4 - 0,5 mm
Groove-width:	0,7 mm
Basis curve frame:	5B
Basis curve lens:	4-6 B
Minimum thickness of lens rim:	1,8 - 2,0 mm

Taillage des verres optiques avec rainure nylon

Profondeur de rainure:	0,4 - 0,5 mm
Largeur de rainure:	0,7 mm
Courbure de base de la monture:	5B
Courbure de base du verre:	4-6 B
Verre:	1,8 - 2,0 mm

IN-LINE GLAZING

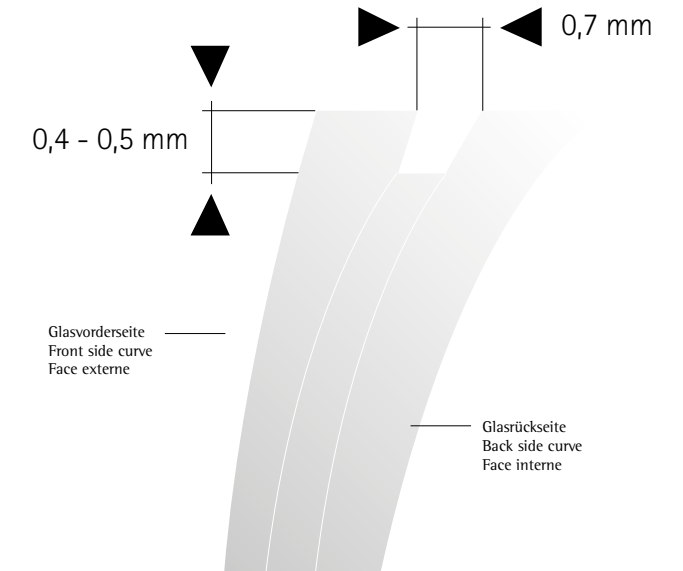

Scheibenform ausschließlich mit Formscheiben oder OMA-Daten übertragbar!  
Transfer shape only via formers or OMA-files!  
Transfer de la forme uniquement en utilisant le gabarit ou le dossier OMA!

- ACHTUNG:** wegen der minimalistischen Querschnitte des Brillenrahmens **auf keinen Fall erwärmen!**
- ATTENTION:** due to minimalist diameters of front frame **do not heat under any circumstances!**
- ATTENTION:** en raison du contour mince, **ne jamais chauffer la monture!**

Linse von hinten einsetzen!  
Notitz: beim Einsetzen von vorne, Gefahr des Ausplatzens

Insert lens from behind!  
Note: mounting from the front could crack the lens

Insérez le verre par l'arrière!  
Note: l'insertion par l'avant peut causer un bris du verre